


FICHE METHODE

• LE MICROSCOPE

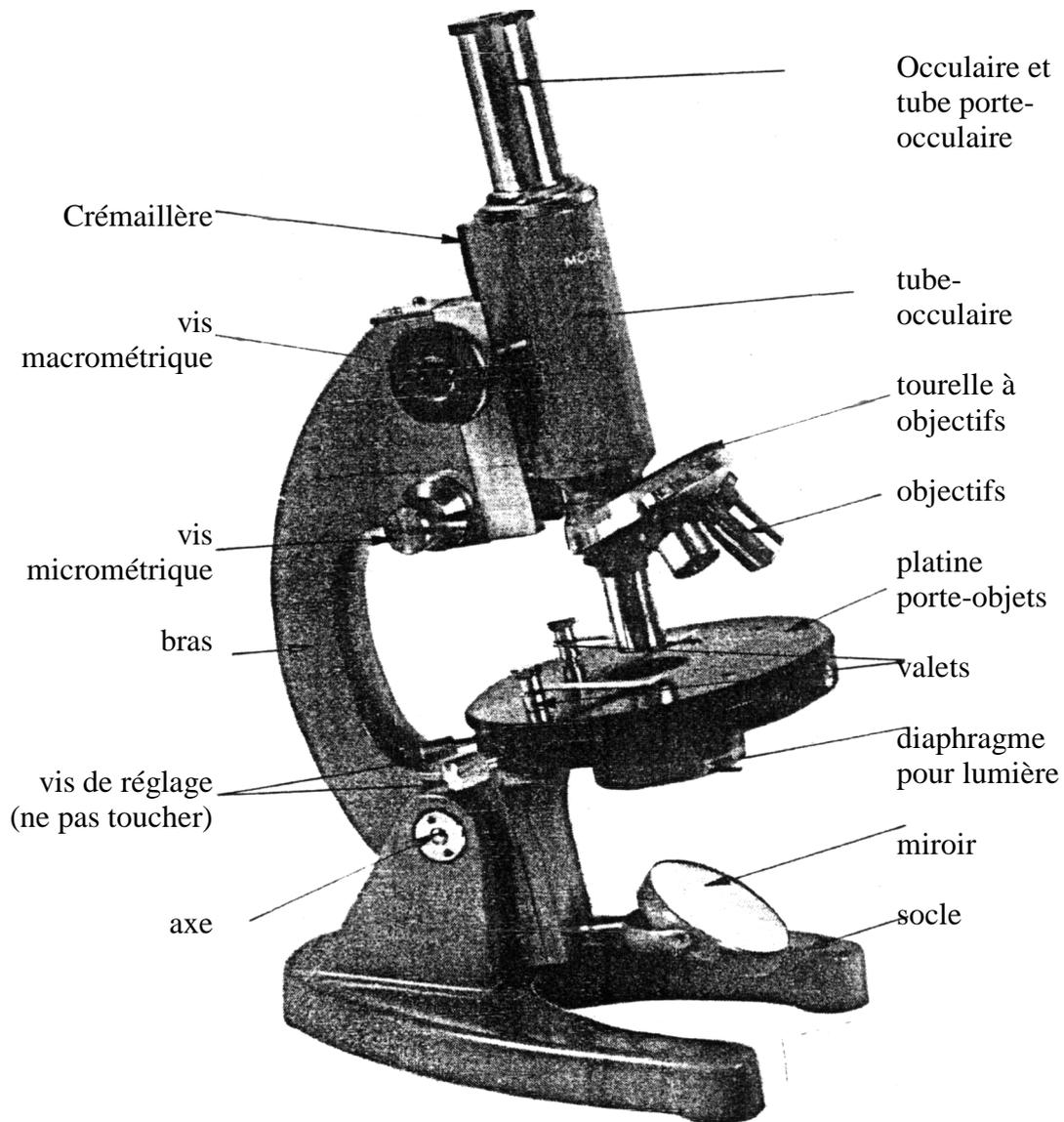

Installer la lame de verre sur la platine porte-objet , orienter le bras du microscope de façon à travailler confortablement, orienter convenablement le miroir pour que la lumière traverse la préparation

TOUJOURS FAIRE LA MISE AU POINT EN REMONTANT TOUT DOUCEMENT LE TUBE OCCULAIRE AU MOYEN DE LA VIS MACROMETRIQUE,.

Calcul du grossissement :

C'est le produit du pouvoir grossissant de l'oculaire (nombre gravé au-dessus de l'oculaire), par le pouvoir grossissant de l'objectif (1er nombre gravé sur l'objectif) :

$$G = \text{oculaire} \times \text{objectif}$$